

新発売

根管拡大形成

# HyFlex EDM - OGSF Sequence

OGSFシーケンス



O

Opener



G

Glider



S

Shaper



F

Finisher

スムーズで安心 - オージーエスエフ - My First Rotary File Sequence

 COLTENE

拡大形成の治療過程を簡易化する事で、歯内療法における習熟度のラーニングカーブを短縮!

HyFlex EDM - OGSFシークエンスで、初期治療をより安心かつスムーズに!



HyFlex EDM  
特徴




滅菌済み  
再使用可能  
保険適用




高い破折抵抗性

放電加工による回転疲労抵抗性の向上によってより安全な治療をご提供いたします

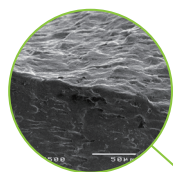

優れた切削力

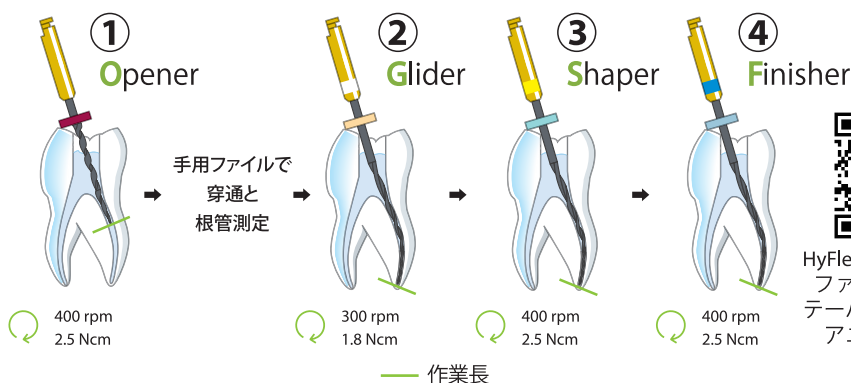

超弾性がなく、  
ファイルがスプリングバックしないため、  
レジンやパーフォレーションのリスクが軽減し、  
本来の解剖学的構造に沿った拡大形成が可能です。

高い柔軟性により  
プレカーブを付与できます

可変  
クロスセクション

切削片の排出と  
破折抵抗性に  
優れています

交換時期がわかりやすい

オートクレーブ滅菌により、本来の形状と強度を取り戻すことができます。  
(\*Sapienza University 2011)  
形状回復する限り何度でも使用可能  
(\*薬事認証あり)となります。  
また「形状回復しない=ファイルの交換時期」となるので交換時期が一目で確認できます。

▼ 使用前



▼ 使用后



▼ オートクレーブ滅菌後



※使用后、金属疲労が目視で確認できない場合でも必ずオートクレーブ滅菌をしてください。

推奨根管充填方法：  
MTSC (マッチドテーパースingleton) テクニック  
使用材料：  
膨張性シーラーガッタフロー2

ガッタフロー2  
カタログリンク



### 拡大形成

HyFlex EDM OGSF シークエンス 4本入り			
	21 mm	25 mm	
OGSF Sequence	60036141	60036142	
HyFlex EDM OGSF リフィル3本入り			
	18 mm	21 mm	25 mm
Orifice Opener	18/.11	60036140	-
Glidepath File	15/.03	-	60023493
Shaping File	18/.045	-	60036136
Finishing File	30/.04	-	60036138
HyFlex EDM Finishing リフィル3本入り			
	21 mm	25 mm	
Finishing File	40/.04	60022271	60019597
Finishing File	50/.03	60022272	60019598
Finishing File	60/.02	60022274	60019599

### 根管乾燥・根管充填

サイズ/ テーパ	HyFlex EDM ペーパーポイント 100本	HyFlex EDM GPポイント 60本
30/.04	60036503	60036504
40/.04	60022676	60022708
50/.03	60022741	60022709
60/.02	60022740	60022710



Opener



Shaper



Glider



Finisher

販売業者

東京歯科産業株式会社

東京本社: 〒101-0021  
東京都千代田区外神田6-10-5  
TEL: 03-3831-0176(代)/FAX: 03-3835-8254  
大阪支店/名古屋営業所/九州支店

選任製造販売業者

AJMD 株式会社  
〒103-0004  
東京都中央区東日本橋2-4-5  
真光ビルディング  
TEL: 03-5614-0733  
FAX: 03-5614-0734

COLTENE