

CJ クラウンジュン

厳選された縫合糸と特殊加工により製造された針を使用して、
 歯科用針付縫合糸のラインアップを揃えました。
 術式に合わせたものを以下のシリーズよりお選びください。
 (EOG滅菌済) ※特注の針付縫合糸もお受けします。

注文番号	針の種類			糸の種類とサイズ			本数
	実寸	形状	形状	サイズ	種類	糸長さ	
No.1	17mm	強弯 1/2	逆三角	4-0	黒ブレイドシルク	45cm	12本入
No.2	22mm	強弯 1/2	逆三角	3-0	黒ブレイドシルク	45cm	12本入
No.3	22mm	強弯 1/2	逆三角	4-0	黒ナイロン	45cm	12本入
No.4	19mm	弱弯 3/8	逆三角	4-0	黒ブレイドシルク	45cm	12本入
No.5	19mm	直針	Vカット	3-0	黒ブレイドシルク	45cm	12本入
No.6	15mm	強弯 1/2	丸針	4-0	黒ナイロン	45cm	12本入
No.7	17mm	強弯 1/2	丸針	3-0	黒ブレイドシルク	45cm	12本入
No.8	19mm	弱弯 3/8	逆三角	4-0	黒ナイロン	45cm	12本入
No.9	17mm	強弯 1/2	逆三角	4-0	白ブイゾーブ	70cm	12本入
No.10	22mm	強弯 1/2	逆三角	3-0	紫ブイゾーブ	70cm	12本入
No.11	17mm	強弯 1/2	逆三角	3-0	緑テフデッサーII	45cm	12本入
No.12	22mm	強弯 1/2	逆三角	3-0	緑テフデッサーII	45cm	12本入
No.13	15mm	強弯 1/2	逆三角	4-0	緑テフデッサーII	45cm	12本入
No.14	17mm	強弯 1/2	逆三角	4-0	緑テフデッサーII	45cm	12本入
No.15	22mm	強弯 1/2	逆三角	4-0	緑テフデッサーII	45cm	12本入
No.16	15mm	弱弯 3/8	逆三角	4-0	緑テフデッサーII	45cm	12本入
No.17	17mm	弱弯 3/8	逆三角	4-0	緑テフデッサーII	45cm	12本入
No.18	19mm	弱弯 3/8	逆三角	4-0	緑テフデッサーII	45cm	12本入
No.19	17mm	強弯 1/2	丸針	4-0	緑テフデッサーII	45cm	12本入
No.20	15mm	弱弯 3/8	丸針	4-0	緑テフデッサーII	45cm	12本入

歯科用針付縫合糸



注文番号	針の種類			糸の種類とサイズ			本数
	実寸	形状	形状	サイズ	種類	糸長さ	
No.21	13mm	弱弯 3/8	丸針	5-0	緑テフデッサーII	45cm	12本入
No.22	11mm	弱弯 3/8	丸針	6-0	緑テフデッサーII	45cm	12本入
No.23	8mm	弱弯 3/8	丸針	7-0	緑テフデッサーII	45cm	12本入
No.24	19mm	直針	Vカット	4-0	緑テフデッサーII	45cm	12本入
No.25	17mm	強弯 1/2	逆三角	4-0	黒ナイロン	45cm	12本入
No.26	17mm	強弯 1/2	逆三角	5-0	黒ナイロン	45cm	12本入
No.27	15mm	弱弯 3/8	逆三角	5-0	黒ナイロン	45cm	12本入
No.28	15mm	強弯 1/2	平型	5-0	黒ナイロン	45cm	12本入
No.29	13mm	弱弯 3/8	平型	5-0	黒ナイロン	45cm	12本入
No.30	17mm	強弯 1/2	丸針	5-0	黒ナイロン	45cm	12本入
No.31	13mm	弱弯 3/8	丸針	5-0	黒ナイロン	45cm	12本入
No.32	15mm	弱弯 3/8	丸針	5-0	黒ナイロン	45cm	12本入
No.33	15mm	強弯 1/2	平型	6-0	黒ナイロン	45cm	12本入
No.34	11mm	弱弯 3/8	平型	6-0	黒ナイロン	45cm	12本入
No.35	15mm	強弯 1/2	丸針	6-0	黒ナイロン	45cm	12本入
No.36	11mm	弱弯 3/8	丸針	6-0	黒ナイロン	45cm	12本入
No.37	8mm	弱弯 3/8	平型	7-0	黒ナイロン	45cm	12本入
No.38	8mm	弱弯 3/8	丸針	7-0	黒ナイロン	45cm	12本入
No.41	15mm	弱弯 3/8	逆三角	5-0	緑テフデッサーII	45cm	12本入
No.42	15mm	強弯 1/2	丸針	6-0	緑テフデッサーII	45cm	12本入

※No.39・40は廃番になりました

販売元 株式会社 **シバタ**

〒110-0005 東京都台東区上野5-25-17
 TEL 03-3836-4811 FAX 03-3836-2585 E-mail: info@dental-shibata.co.jp

製造販売元 株式会社 **河野製作所**

〒272-0832 千葉県市川市曾谷2-11-10



- ① 一目で必要な情報が分ります。
- ② ニードルウィンドウ
狙い通りのポイントで針を把持できます。
- ③ プロテクションカバー
針刺し事故を予防します。
- ④ ユニークなレール形状
巻き癖を極力おさえ、スムーズに取り出せます。

縫合糸の種類

● 緑テフデッサーⅡ縫合糸(非吸収性)(ブレイド糸)

PTFEコーティングポリエステル合成縫合糸。

**ブランクや血液が付きにくい為、
組織通過性が良く、感染防止に役立ちます。**

優れた抗張力を持つポリエステル編糸です。
特殊コーティングにより、優れた組織通過性と感染防止に役立ちます。

**操作性が良く、結紮がスムーズに行え、
確実に締まります。**

特殊加工により、結紮時の緩みを少なくし、より絹糸に近い高い結紮性能を実現しました。

● ブレイドシルク縫合糸(非吸収性)(ブレイド糸)

原糸としてより細い絹糸を使用し、絹糸本来の柔らかさと高い操作性が特徴です。


● ナイロン縫合糸(非吸収性)(モノフィラメント糸)

強い結紮抗張力を持っております。組織通過性が良く、組織反応は極めて少なくなっております。

● ブイゾーブ縫合糸(吸収性)(ブレイド糸)

ポリグリコール酸100%を使用した合成吸収性縫合糸です。
優れた結紮保持性と組織通過性が特徴です。

- ・モノフィラメント糸とは：単一のフィラメントからなるもの
- ・ブレイド糸とは：複数のフィラメントを編み上げたもの
- ・吸収糸とは：一定期間は創部を維持する抗張強度を有した後、加水分解などで経時的に体内に吸収されるもの
- ・非吸収糸とは：生体内で分解・吸収されずずっと残存するもの

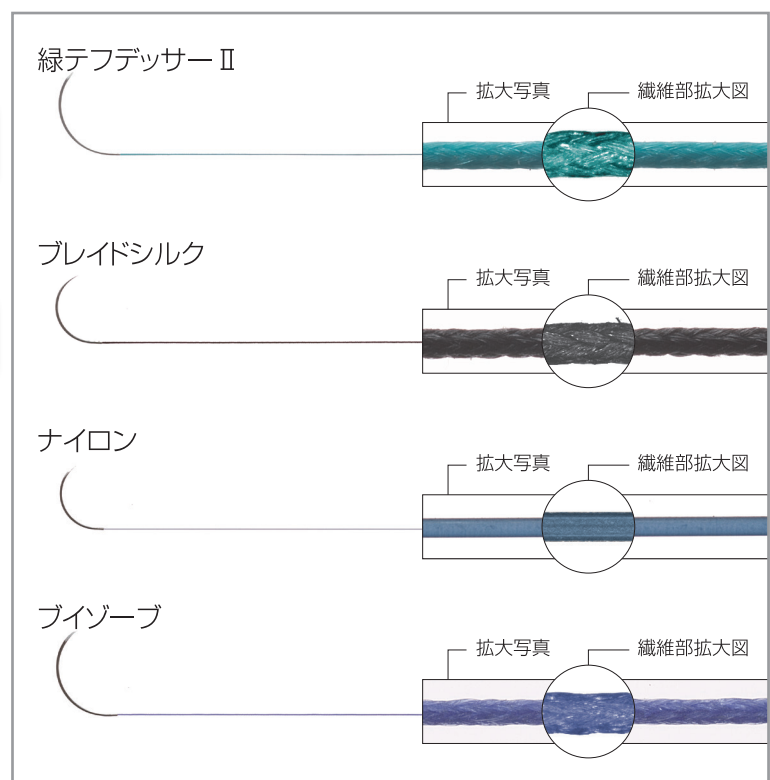


承認番号(高度管理医療機器)
針付テフデッサーⅡ 16100BZZ00938000
針付ブレイドシルク縫合糸 16100BZZ01126000
針付ブイゾーブ 20800BZZ00005000

認証番号(高度管理医療機器)
針付ナイロン縫合糸 229AFBZX00015000


針の種類

■ 逆三角針

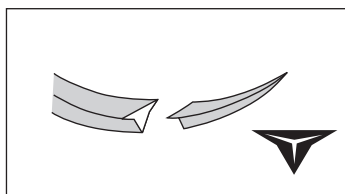


針断面が逆三角になっており、刃が彎曲の外側についています。硬く刺通しにくい部所に使用されております。

■ 丸針

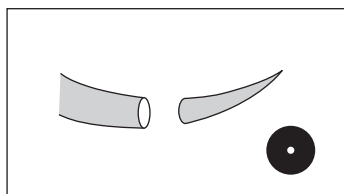


先端が細く鋭くなっています。柔らかく刺通しやすい「軟組織」に使用されております。傷口が小さく抑えられます。

■ 平型針

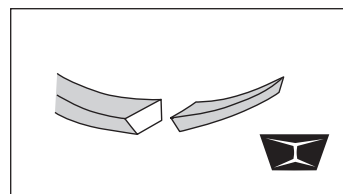

針断面が台形状になっております。特に切れ味が優れております。

■ Vカット

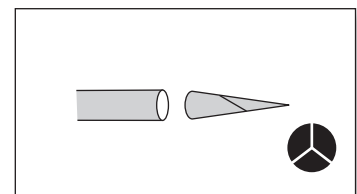

刃を上面にたて加工を施しております。特に硬く刺通しにくい部所の切れ味が優れております。

販売元 株式会社 **シバタ**

〒110-0005 東京都台東区上野5-25-17
TEL 03-3836-4811 FAX 03-3836-2585 E-mail: info@dental-shibata.co.jp

製造販売元 株式会社 **河野製作所**
〒272-0832 千葉県市川市曾谷2-11-10

CJ クラウンジュン

歯科用縫合糸

●コマ巻き糸タイプ

EOG滅菌済製品です。

包装 糸の長さは10m巻です。
無駄のない使用が特徴の
コマ巻きタイプです。

※用途に合わせて各種縫合糸をご使用ください。
※糸のサイズ(太い)1-0・2-0・3-0・4-0・5-0・6-0(細い)と
順次細くなります。
※白糸他、特注サイズの糸もお受けします。



注文番号	糸の種類	色	サイズ
T103	テフデッサーⅡ	緑	3-0
T104	テフデッサーⅡ	緑	4-0
T105	テフデッサーⅡ	緑	5-0

承認番号(高度管理医療機器) (16100BZZ00938000)

注文番号	糸の種類	色	サイズ
S103	ブレイドシルク	黒	3-0
S104	ブレイドシルク	黒	4-0
S105	ブレイドシルク	黒	5-0

承認番号(高度管理医療機器) (20300BZZ00969000)

注文番号	糸の種類	色	サイズ
N103	ナイロン	黒	3-0
N104	ナイロン	黒	4-0
N105	ナイロン	黒	5-0

認証番号(高度管理医療機器) (229AFBZX00015000)

●切り糸プリスタータイプ

EOG滅菌済製品です。

包装 (45cm×10本) 10袋入りです。

コンパクトな包装のプリスターパックで1パックの取り扱いが容易です。

※用途に合わせて各種縫合糸をご使用ください。※糸のサイズ(太い)1-0・2-0・3-0・4-0・5-0・6-0(細い)と順次細くなります。
※白糸他、特注サイズの糸もお受けします。

注文番号	糸の種類	色	サイズ
T453-P	テフデッサーⅡ	緑	3-0
T454-P	テフデッサーⅡ	緑	4-0
T455-P	テフデッサーⅡ	緑	5-0

承認番号(高度管理医療機器) (16100BZZ00938000)

注文番号	糸の種類	色	サイズ
S453-P	ブレイドシルク	黒	3-0
S454-P	ブレイドシルク	黒	4-0
S455-P	ブレイドシルク	黒	5-0

承認番号(高度管理医療機器) (20300BZZ00969000)



●切り糸タイプ

EOG滅菌済製品です。

包装 (45cm×10本) 10袋入りです。

あらかじめ使いやすい長さでカットされた
切糸タイプです。

※用途に合わせて各種縫合糸をご使用ください。
※糸のサイズ(太い)1-0・2-0・3-0・4-0・5-0・6-0(細い)と順次細くなります。
※白糸他、特注サイズの糸もお受けします。



注文番号	糸の種類	色	サイズ
T453	テフデッサーⅡ	緑	3-0
T454	テフデッサーⅡ	緑	4-0
T455	テフデッサーⅡ	緑	5-0

承認番号(高度管理医療機器) (16100BZZ00938000)

注文番号	糸の種類	色	サイズ
S453	ブレイドシルク	黒	3-0
S454	ブレイドシルク	黒	4-0
S455	ブレイドシルク	黒	5-0

承認番号(高度管理医療機器) (20300BZZ00969000)


注文番号	糸の種類	色	サイズ
N453	ナイロン	黒	3-0
N454	ナイロン	黒	4-0
N455	ナイロン	黒	5-0

認証番号(高度管理医療機器) (229AFBZX00015000)

●糸の種類・特徴


●緑テフデッサーⅡ

ブラックや血液が付きにくい為、組織通過性が良く、感染防止に役立ちます。
操作性が良く、結紮がスムーズに行え、確実に締まります。

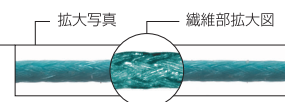


●ブレイドシルク縫合糸

原糸としてより細い絹糸を使用し、絹本来の柔らかさと高い操作性が特徴です。

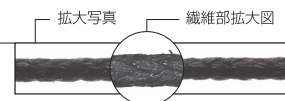

●ナイロン縫合糸

強い結紮抗張力をもっております。組織通過性が良く、
組織反応は極めて少なくなっております。

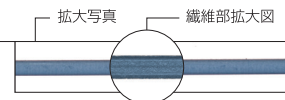

販売元 株式会社 **シバタ**

〒110-0005 東京都台東区上野5-25-17
TEL 03-3836-4811 FAX 03-3836-2585 E-mail: info@dental-shibata.co.jp

製造販売元 株式会社 **河野製作所**
〒272-0832 千葉県市川市曾谷2-11-10